

KaVo ESTETICA® E70/E80 Vision

Votre Vision à portée de mains



KaVo. Dental Excellence.

Vos souhaits, notre inspiration.

Au départ, il y avait une idée. Une vision.

L'aboutissement d'un nouveau concept de traitement pour offrir un support optimal à toutes les étapes de travail. Un concept correspondant à vos attentes.

Avant toute chose, nous vous avons écouté attentivement. Gardant à l'esprit un grand nombre de vos suggestions, nous nous sommes efforcés de mettre en place exactement ce que vous souhaitiez : des opérations simplifiées, des procédures faciles, une communication patients moderne, un accès aux données patients et un système d'hygiène totalement automatisé.

Des changements oui, mais nous avons également su conserver ce qui vous satisfaisait au mieux à savoir l'ergonomie ou encore la suspension unique du fauteuil.

Aujourd'hui, ce fauteuil est notre meilleure innovation en terme d'unités de soins. Il vous donne une réelle vision de l'avenir de votre cabinet en exauçant tous vos souhaits. Les soins sont facilités au quotidien!

KaVo ESTETICA E70/E80 Vision – l'expérience de votre Vision.

Le confort selon les exigences de chacun : l'élément praticien des KaVo ESTETICA E70 et E80 Vision est toujours disponible en trois versions: Cart, cordons pendants ou fouets.*

** Disponible pour le KaVo ESTETICA E70 Vision*



Toutes les nouveautés en un coup d'œil :

Le nouvel élément dentiste en un clic.

- 1 Nouveau concept d'exploitation pour un accès rapide et direct à toutes les fonctions importantes pour un gain de temps et un processus de traitement facilité.

Une communication patients prête à l'emploi.

- 2 KaVo ERGOcam One, la caméra intra-orale la plus simple d'utilisation
- 3 Les nouveaux écrans HD: L'écran KaVo HD 22» et l'écran KaVo One 19»

CONEXIO. Moins de recherches et plus d'actions.

- 4 Le logiciel CONEXIO avec son interface des données intelligente vous facilitera le travail dans vos tâches quotidiennes, grâce à ses fonctions utiles mais aussi grâce à l'accès permanent aux données du patient.

Hygiénique. Automatique. Intégré.

- 5 Le système d'hygiène central est intégré, il dispose d'adaptateurs amovibles pour les instruments et de tuyaux d'aspiration pour gagner du temps. Le système comprend un programme de nettoyage et de désinfection automatique.

Nouveau design plus moderne et épuré.

- 6 La Blue Line Edition: en couleur ocean blue ou smoky blue
- 7 Un design revisité pour un fauteuil blanc moderne et très tendance.

Le fauteuil suspendu, testé et approuvé.

- 8 Nouveau: Accoudoirs facilement ajustables
- 9 Poids patient maximum autorisé de 180 kg

Chirurgie facilement intégrée et sans restriction.

- 10 Des nouvelles fonctions chirurgicales avec un moteur - petit & léger - et une pompe de solution saline intégrée*.

** Illustration, voir page 12*



Suivez simplement votre intuition.

La simplicité en un seul clic.

Avec le nouvel écran tactile, contrôlez votre KaVo ESTETICA E70/E80 Vision de façon plus intuitive que jamais !

Cet écran complété de son interface de données intelligente, permet d'accéder à n'importe quel moment aux fonctions et informations importantes. Avant, pendant et après les soins.

Le tout nouveau design de l'interface utilisateur a été spécialement conçu pour faciliter le flux de travail dentaire. Sa conception claire et sa structure logique, garantissent une fluidité et une simplicité d'utilisation.

La distinction Red Dot Award: Communication Design pour le concept de commande montre que l'interface utilisateur correspond à la tendance actuelle et que le design aussi bien que la logique de commande intuitive ont été évalués comme excellents par le jury.



reddot award 2015
winner interface design

Votre méthode, notre priorité.

Votre fauteuil doit avoir son propre fonctionnement, exactement comme vous et votre méthode de travail. C'est pourquoi vous pouvez ajuster l'installation de votre KaVo ESTETICA E70/E80 Vision dans les moindres détails afin de la faire correspondre au mieux à vos exigences. Avec son instrumentation flexible, les spécialisations ne posent absolument aucun problème. Il vous suffit d'équiper l'élément praticien et l'élément assistante selon vos besoins et ceux de votre équipe.

De nombreuses fonctions sont personnalisables par le dentiste, comme par exemple: son nom, ses types de soins ou encore l'affectation directe des touches sur l'écran d'accueil.

D'autres options complémentaires et extensions sont possibles à tout moment grâce à des interfaces pré-programmées.



*Bien structuré. Simple. Clair.
L'interface utilisateur de l'élément praticien au design moderne et innovant.*

Des surfaces vitrées de haute qualité sur l'élément praticien et l'élément assistante, assurent un nettoyage rapide avec de meilleures propriétés d'hygiène.

Un équipement spécifique pour tous.

Plus de liberté. Plus de confort.

Avec l'écran tactile ou la commande au pied, accédez sans effort à toutes les fonctions et tous les paramètres des appareils intégrés spécifiques à vos soins. Sans pour autant perdre des yeux les informations présentes sur l'élément praticien. Il est à tout moment possible de programmer librement des processus de soins individuels.



La version fouets de l'élément praticien est elle aussi équipée du nouveau concept de commande.

À la pointe de l'endodontie.

Économisez l'acquisition d'un appareil d'endodontie en utilisant les fonctions d'endodontie intégrées. Avec trois modes différents de commande de limes, vous êtes parfaitement équipé pour les applications d'endodontie.

L'élément praticien permet de régler, de nommer et d'enregistrer directement les paramètres importants comme le rapport de transmission et la vitesse du couple.

L'option chirurgicale intelligente.

Rendez votre travail encore plus confortable en ajoutant à votre KaVo ESTETICA E80 Vision, le nouvel équipement KaVo INTRA LUX S600 LED – quand vous le souhaitez. Avec les instruments chirurgicaux KaVo et la pompe de solution saline intégrée à l'élément praticien, vous disposez de toutes les fonctions d'un appareil de chirurgie moderne, directement sur votre unité de soins.



Grâce à des fonctions d'endodontie et de chirurgie intégrées et programmables librement, votre flux de travail est idéal et vous n'avez pas besoin d'acquérir des appareils externes.



Offrez-vous une posture saine et confortable.

Mettez-vous à l'aise.

Le concept ergonomique des KaVo ESTETICA E70/E80 Vision permet un réel confort dans toutes les positions (assis, debout, couché...)

Difficile de trouver de meilleures conditions pour une posture saine et un travail confortable pour vous et votre assistante. Bénéficiez d'une réelle liberté de mouvements grâce au fauteuil à suspension et à son système intuitif. Permettez également à vos patients d'être toujours confortablement allongés. La garniture confortable et le dossier Comfort à longueur réglable vous assurent de pouvoir adapter votre KaVo ESTETICA E70/E80 Vision à toutes les tailles.

Offrez plus d'espace à vos jambes.

Laissez-vous séduire par le grand espace situé sous le fauteuil et placer la pédale de commande où vous le souhaitez. Le concept de fauteuil à suspension unique des KaVo ESTETICA E70/E80 Vision vous offre toutes les libertés pour un travail sain et détendu. Signifiant ainsi: une posture saine, une position assez proche du patient et une réelle liberté de mouvements pour un confort optimal.



Gardez la meilleure posture !

Laissez le fauteuil accompagner tous vos mouvements, en traitant vos patients dans une posture saine et confortable. Vous pouvez régler votre KaVo ESTETICA E70/E80 Vision selon vos exigences et habitudes personnelles. Il s'adapte parfaitement à votre taille grâce au réglage de la hauteur variable entre 350 mm et 900 mm, garantissant ainsi des conditions ergonomiques optimales, que vous soyez assis ou debout pour traiter vos patients.

Optez pour le confort et la sécurité de vos patients.

La technologie Trendelenburg du fauteuil permet une installation du patient confortable et ergonomique dans toutes les positions de soins. En effet, le repose-pieds s'incline ou se relève automatiquement pour s'adapter à l'inclinaison du dossier. Ce mouvement évite donc au patient une torsion ou un étirement du dos lors du réglage du dossier. De plus, la surélévation des jambes favorise le système vasculaire du patient.

Choisissez l'excellence.

Les unités de soins KaVo ESTETICA E70/E80 Vision ainsi que le siège opérateur PHYSIO Evo ont, comme leurs prédécesseurs, reçu le label de qualité de l'association Campagne Dos Sain (Aktion Gesunder Rücken, AGR) pour leur conception ergonomique. Des experts issus de différentes spécialités médicales les ont évalué à l'aide de critères de contrôle stricts et les ont reconnu: unités de soins dentaires à l'ergonomie optimale. Ce sont les premières unités de soins de chirurgie dentaire à avoir reçu ce label.



PHYSIO Evo et Evo F offrent une ergonomie parfaite et une assise extrêmement confortable pour un travail sain et sans fatigue.



Le confort repose sur chaque détail.


La qualité adaptée à tous.

Offrez à vos patients le plaisir d'un confort sur mesure et profitez d'un processus de soins fluides en toute situation. Le fauteuil KaVo ESTETICA E70/E80 Vision vous garantit une accessibilité à toutes ses fonctions même pour vos patients en surpoids (max. 180kg) Ainsi, le confort du fauteuil sera accessible à tous sans exception.

Des mouvements doux pour plus de détente.

La fonction Slow-Motion permet de déplacer le fauteuil au ralenti lors des soins nécessitant l'usage du microscope. Ceci est en particulier appréciable pour traiter les patients âgés.

*Position supérieure : 900 mm et position inférieure : 350 mm.
Idéal pour toutes les exigences, jusqu'au travail en position debout.*

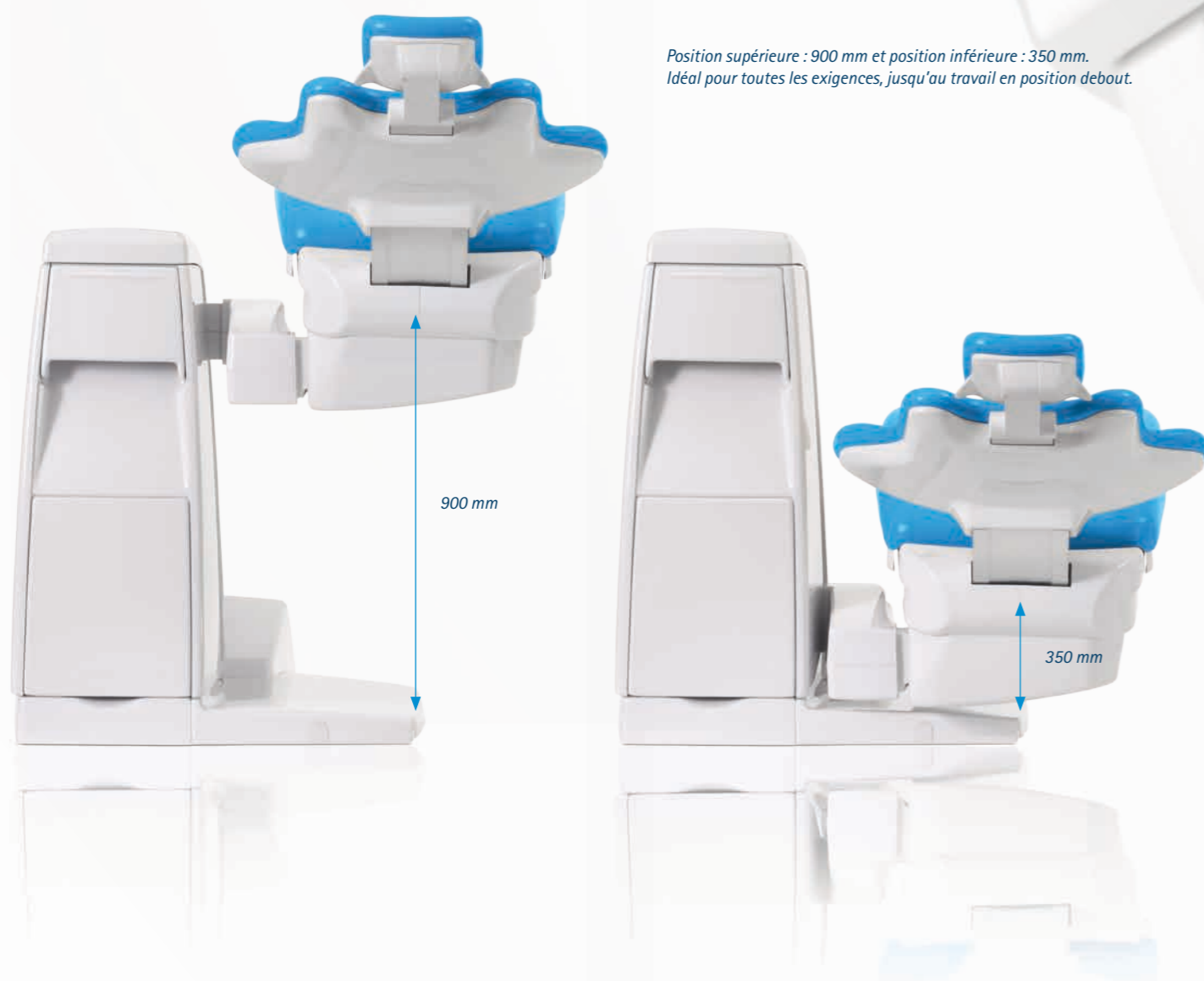

S'installer en toute simplicité.

Permettez à vos patients de s'installer et de se relever plus facilement, avec les nouveaux accoudoirs de KaVo ESTETICA E70/E80 Vision. En effet, ils sont très faciles à abaisser et offrent tenue et sécurité pendant les soins, sans pour autant réduire la liberté de mouvements du praticien.



Les nouveaux accoudoirs ont non seulement un aspect moderne, mais ils offrent aussi une tenue et une sécurité supplémentaires pour vous et vos patients.

Une pédale pour toutes les fonctions.

Vos mains sont occupées lors du traitement de vos patients ? Actionnez tout simplement votre KaVo ESTETICA E70/E80 Vision avec le pied. Toutes les fonctions et tous les appareils intégrés peuvent être utilisés via l'interface intuitive de la pédale de commande. Vous réduisez ainsi le risque de contamination croisée et travaillez dans des conditions d'hygiène optimales.

De plus, vous ménagez vos efforts ! En effet, en actionnant la pédale de commande, votre jambe reste absolument détendue grâce au simple mouvement droite/gauche de votre pied sans effort et en douceur. Vous pouvez donc travailler avec une grande précision, et sans vous fatiguer. Une pédale sans fil est également disponible en option, permettant donc un placement encore plus libre.




Pour un flux de travail parfait.


La combinaison parfaite.

Misez sur une équipe composée de talents individuels géniaux et tout simplement imbattables en interaction. Pourquoi ? Parce que tous les instruments et les fonctions sont parfaitement liés entre eux dans KaVo ESTETICA E70/E80 Vision. Intégrez même des moteurs d'endodontie et de chirurgie sans problème. Contrôlez votre élément praticien directement avec l'écran tactile – ou avec la commande au pied. Raccordez très facilement votre KaVo ESTETICA E70/E80 Vision à d'autres appareils grâce à l'interface USB et installez-les en toute simplicité via le logiciel système CONEXIO.

Les KaVo ESTETICA E70/E80 Vision vous offrent un maximum de confort et bien plus encore ! Grâce aux éléments praticien et assistante à la pointe de l'ergonomie, profitez d'une flexibilité élevée, d'une performance optimale et d'un confort maximal. Vous et votre assistante y gagnez forcément.

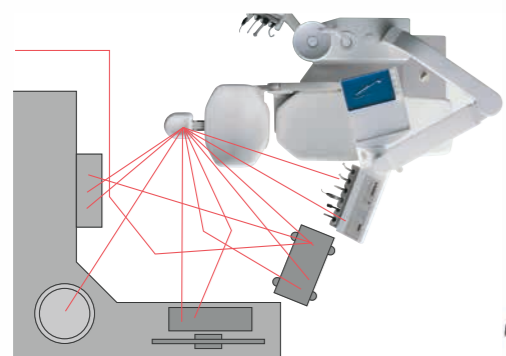

Déplacements avec une unité de soins conventionnelle.

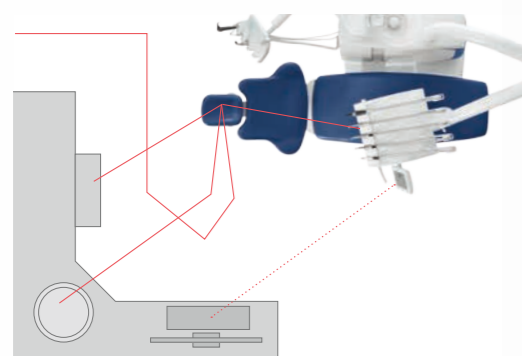

Déplacements avec le nouveau KaVo ESTETICA E70 Vision.

Chaque chose à sa place.

Profitez d'un processus de travail facilité grâce au système de support Centro de KaVo. Il s'adapte à vos exigences personnelles en termes d'espace et de rangement. Tous les appareils importants sont organisés de façon logique et ergonomique en un seul et même endroit ! Cela permet donc de raccourcir les trajectoires de mouvements, pour plus de liberté. Entièrement automatique, vous avez toujours tout à portée de mains.

Par ailleurs : lors de l'installation ou de la mise à jour d'appareils supplémentaires ou de technologies futures, vous restez absolument flexible. Les nombreux adaptateurs rendent les appareils simples et rapides à changer.

Équipement personnalisable pour un travail personnalisé – le système de support Centro.



L'avenir sera simple – Pour tout le monde.

La découverte de la fluidité.

Enthousiasmez votre équipe avec le design moderne et élané du nouvel élément assistante de votre KaVo ESTETICA E70/E80 Vision. Équipé d'un écran tactile et d'une interface utilisateur claire, semblable à l'élément praticien, son utilisation est très intuitive. En effet, toutes les fonctions centrales d'hygiène, du fauteuil et du scialytique sont accessibles rapidement et directement.

Entièrement adapté à vos besoins.

Faites-en une affaire personnelle. L'élément assistante offre de nombreuses possibilités pour répondre à vos attentes individuelles. Il peut être configuré librement pour s'adapter parfaitement à toutes les exigences de votre assistante. De la pièce à main de polymérisation à l'aspiration supplémentaire.

Comme d'habitude.

Pour des mouvements fluides et rapides, les instruments peuvent être ajustés exactement selon vos habitudes et préférences individuelles. Rendant ainsi votre travail bien plus simple et confortable. Le support d'instruments amovible permet une meilleure hygiène et le réglage flexible de la hauteur ainsi que la grande plage de basculement permettent une ergonomie à l'état pur.



Précision et stabilité – seulement pour KaVo ESTETICA® E80 Vision

Flux de travail optimal jusque dans les moindres détails.

Découvrez une toute nouvelle façon de travailler, avec un confort de soins maximal pour vous et pour vos patients. Profitez de qualités supérieures, spécialement pour KaVo ESTETICA E80 Vision. Vous allez être conquis !

Stable et précis.

Placez votre élément praticien exactement là où vous le souhaitez. Le frein pneumatique de série permet de déplacer encore plus précisément votre KaVo ESTETICA E80 Vision et de le positionner de façon stable. Ainsi, vous avez toujours tout ce qu'il vous faut à portée de mains.

Chaque chose à sa place.

Que votre patient soit grand ou petit, le mouvement horizontal fait en sorte que votre zone de travail – la bouche du patient – reste toujours au même endroit. Vos champs de traitements restent donc toujours les mêmes. Même quand vous déplacez le fauteuil dentaire pour passer des soins sur la mâchoire inférieure aux soins sur la mâchoire supérieure.

Position idéale pour chaque patient.

Adaptez-vous parfaitement à chaque patient. Avec le réhaussement motorisé de l'assise, les patients souffrant de lordose ou de cyphose, et même les enfants, sont allongés dans une position confortable et ergonomique. Même en cas de soins longs, le réhaussement de l'assise offre plus de confort en position allongée dans la mesure où vous pouvez déplacer le patient de temps en temps.



Seul KaVo vous permet, à vous ainsi qu'à vos patients, de profiter du confort du réhaussement motorisé de l'assise.

Crachoir à rotation automatique.

Très pratique, le crachoir pivote automatiquement vers le patient et revient en place dès qu'il reprend sa position initiale de traitement.

Vous êtes donc prêts pour l'avenir grâce aux interfaces USB intégrées.

Raccordez très facilement votre KaVo ESTETICA E80 Vision à d'autres appareils sélectionnés grâce aux interfaces USB. Ce raccordement est particulièrement simple, car aucun réglage supplémentaire n'est nécessaire en règle générale avec une interface USB. Votre système de soins reconnaît automatiquement l'appareil que vous avez raccordé.



Utilisez l'espace libéré par la possibilité de coulissage horizontal selon vos besoins.

NOUVEAU ! Moteur chirurgical S600 LED – puissant et léger à la fois.

Travaillez en toute légèreté ! Le nouveau moteur chirurgical S600 LED de KaVo est un des plus petits et des plus légers moteurs chirurgicaux au monde. 28 % plus léger et 20 % plus court que le modèle précédent.

Matériel de chirurgie complet avec pompe à sérum physiologique intégrée.

Avec la pompe à sérum physiologique intégrée directement à l'élément praticien et le support pour le sérum physiologique, vous bénéficiez d'un très grand confort et votre travail est efficacement allégé dans tous les soins chirurgicaux. C'est ce qui se fait de mieux.

Avec le KaVo S600 LED, l'un des plus petits et des plus légers moteurs au monde, les procédures chirurgicales quotidiennes sont moins stressantes.



Communication patients optimale – Vous avez toutes les clés en mains.

Utilisez le langage des images.

Expliquez les mesures thérapeutiques nécessaires à vos patients de manière détaillée. Utilisez des clichés d'examen de haute résolution et des images avec restitution brillante des couleurs pour la communication avec les patients. C'est spécialement dans ce but qu'a été conçu le système CONEXIO com Communication avec les patients.

KaVo ERGOcam One – Petite caméra pour une grande vision.

Cette caméra vous facilitera la vie. Expliquez à vos patients leurs cas cliniques à l'aide d'images avec un grand champ et une excellente restitution des couleurs. La plage de profondeur de champ est tellement grande qu'elle rend inutile la mise au point. Facile d'utilisation, la caméra KaVo ERGOcam One vous fournit toujours le cliché parfait. Non seulement c'est confortable, mais cela vous fait aussi gagner un temps précieux. Vous pouvez déclencher l'image à la main ou avec la pédale de commande au pied.

KaVo DIAGNOcam – la radiographie sans rayons X.

Réalisez un cliché ou une vidéo d'un cas clinique, c'est à vous de décider! Sur l'élément praticien ou à l'aide de la commande au pied. Grâce à la caméra KaVo DIAGNOcam, vous serez en mesure de détecter des lésions sérieuses de manière anticipée. Les ondes lumineuses remplacent les rayons X nocifs. Trouvez plus facilement les caries et recevez en échange le sourire radieux de vos patients.

Microscope dentaire Leica M320 – la précision jusque dans les moindres détails.

Découvrez une nouvelle dimension avec le microscope Leica M320, spécialement conçu pour la médecine dentaire. La combinaison d'une technologie d'images Full HD et d'un éclairage LED moderne donne des images incroyablement nettes, précises et lumineuses dans une excellente profondeur de champ. Avec son objectif MultiFoc et sa distance focale variable de 200 à 300 mm, vous pouvez passer d'un niveau de grossissement à un autre, ce qui vous assure une mise au point toujours parfaite.

Les images du microscope s'affichent sur le KaVo Screen et il suffit d'appuyer sur un bouton pour les sauvegarder facilement dans les données du patient sur CONEXIO.

Vous verrez, avec le microscope dentaire Leica M320, votre vision sera nettement plus claire.

Communiquez avec vos patients.

Impressionnez vos patients avec des images d'une extrême netteté. Les nouveaux écrans KaVo One et KaVo HD offrent une qualité d'image de haute résolution, des valeurs de contraste saisissantes et une restitution brillante des couleurs. Parfaitement adaptés à toutes les fonctionnalités des appareils d'imagerie comme les caméras ou les microscopes. Les écrans sont simples à utiliser depuis l'écran tactile de l'élément praticien. Pour votre sécurité en matière d'hygiène, les deux écrans ont des vitres de protection en verre, de faibles interstices sur les boîtiers et s'ajustent d'une seule main.

Ecran KaVo One – entrez dans le monde de la haute définition

- HD-True-Flatscreen
- Format d'image : 16:9
- Taille de l'écran : 19 pouces
- Deux entrées digitales pour microscope et PC

Ecran KaVo HD – le choix parfait en Full HD

- Full-HD-True-Flatscreen
- Format d'image : 16:9
- Taille de l'écran : 22 pouces
- Deux entrées digitales pour microscope et PC



CONEXIO

Pour un cabinet connecté.

Quoi que vous souhaitez réaliser, CONEXIO vous ouvre la voie.

Découvrez plus d'efficacité dans votre pratique au quotidien ! C'est précisément ce que vous apporte CONEXIO. Accédez directement à toutes vos données patient sur l'écran tactile de l'unité de soins. Vous devez ajouter de nouvelles données ? Aucun problème. Toutes les données collectées sont directement affectées au dossier du patient. CONEXIO facilite vos processus de travail. Laissez-vous guider avec logique et efficacité dans tous vos processus de travail. Rapide, facile à utiliser et intuitif; CONEXIO vous donne un maximum de liberté.



Bénéfique pour votre diagnostic. Instructif pour vos patients.

L'option Screenshot de CONEXIO est pratique pour couper une zone d'une image et l'enregistrer en tant qu'image séparée. Que ce soit à partir d'une vidéo ou d'une photo – réduction, contraste, luminosité, agrandissement et enregistrement – tout cela ne nécessite à présent plus aucun logiciel supplémentaire.

Gardez une vue d'ensemble – Historique d'expertise automatique.

Tous les résultats sont clairement consignés, rassemblés et enregistrés par le système entièrement automatique. Utilisez des filtres de recherches pour trouver rapidement des informations précises dans l'historique.

Un concept de soins qui fait des pieds et des mains.

Pour que le travail soit un plaisir. Tout est exactement là où vous en avez besoin, à savoir directement disponible sur votre élément praticien. C'est possible, grâce à l'interface utilisateur conviviale de l'écran tactile de l'unité de soins, qui vous assure un accès à l'intégralité du dossier du patient. Et si vous avez les deux mains prises : toutes les fonctions centrales de CONEXIO peuvent aussi être commandées et activées avec la commande au pied. Pratique et hygiénique.

Toujours à la pointe de la technologie.

Vous souhaitez raccorder un nouvel appareil de soins à votre KaVo ESTETICA E70/E80 Vision ? Rien de plus simple ! CONEXIO détecte immédiatement et automatiquement les composants du matériel KaVo. En résumé : Plug-and-Play pour chaque extension de systèmes.


Les actualisations des logiciels et des micrologiciels sont automatiquement détectées et préparées à l'installation. Votre système est donc toujours à jour et la sécurité de votre stock de données est assurée.

En toute sécurité La sauvegarde automatique des données.

La sécurité, c'est tout simple. Surtout quand on n'a plus besoin de penser à sauvegarder. Vous planifiez quand et CONEXIO sauvegarde vos données à intervalles parfaitement réguliers. Ce qui vous laisse plus de temps pour l'essentiel.

Swap Tray Votre plate-forme d'échange protégée.

Avec Swap Tray, vous pouvez collecter des données comme des photos numériques, des clichés radiographiques ou des vidéos et les partager avec d'autres utilisateurs de CONEXIO. Les images peuvent être échangées en format standard ou rendues anonymes sur demande. Tout simplement, sans surcharger votre boîte mail.

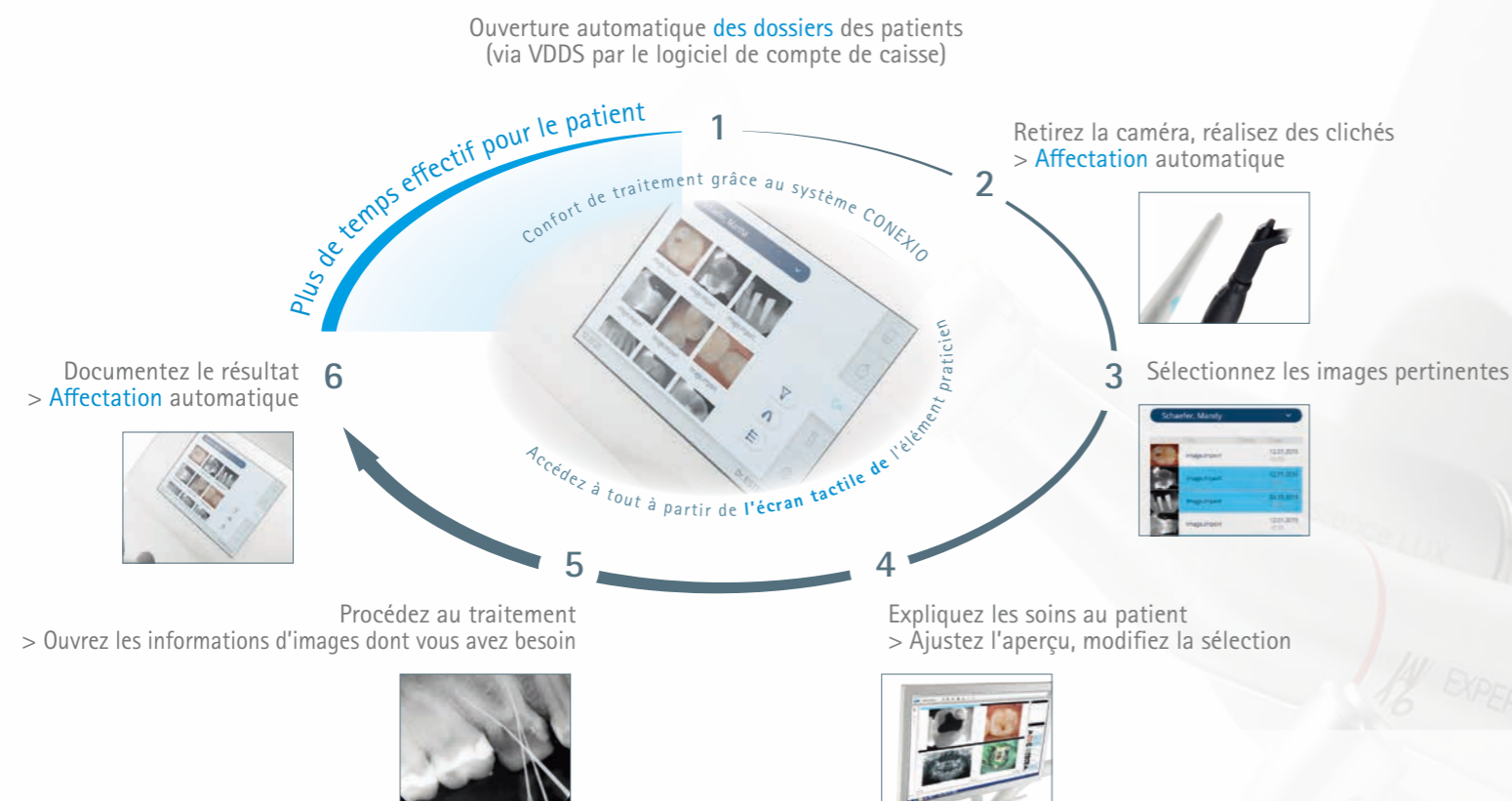

Des formes et couleurs fascinantes.

Notre vision pour une agréable atmosphère de bien-être.

Portez un nouveau regard sur le KaVo ESTETICA E70/E80 Vision. Voyez-le de l'extérieur. Regardez ses formes et ses couleurs. L'accent est mis ici sur le style et la classe. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que le KaVo ESTETICA E80 conçu par SLOGDESIGN ait reçu le prix très convoité Good Design Award. Corps d'unité élégant. Surfaces de qualité. Ligne d'ensemble ergonomique. Et, avec un large choix de coloris de peintures et de selleries, de nombreuses possibilités pour apporter votre touche personnelle. La présentation d'ensemble crée un sentiment de confiance et de sécurité. Une vision pour le bien-être de tous. Pour vous, pour votre équipe et pour vos patients.

Peintures métalliques



Peinture carters unies



Coloris selleries



Dossier Comfort : confort maximal et large appui pour les épaules des patients.

Vos patients sont toujours parfaitement installés.

Les patients sont tous différents. Ils n'ont pas la même silhouette, la même taille ni le même poids. Heureusement, vous avez un fauteuil dentaire qui tient compte de ces différences.

Vos patients sont allongés dans une position particulièrement confortable avec le large dossier Comfort. Grâce à sa longueur réglable, le KaVo ESTETICA E70/E80 Vision s'adapte à toutes les tailles et à toutes les corpulences. Le dossier Progress est particulièrement étroit et vous offre un très bon accès au patient. Avec son coussin de tête, vos patients seront très confortablement allongés même lors des traitements plus longs. La perfection en terme de confort et d'ergonomie.

Dossier Progress : position de travail correcte et accès optimal pour le praticien, en particulier pour les soins destinés aux enfants.

Le confort commence par la tête.

Mettez-vous à l'aise, vous et votre patient. Réglez avec précision la tête de votre KaVo ESTETICA E70/E80 Vision pour que la tête et la bouche soient le mieux placées possible. L'angle d'inclinaison de la tête est réglable en continu. Les positions fixes sont précisément adaptées à l'anatomie. Qu'elle soit motorisée, pneumatique ou mécanique, vous trouverez toujours la position de tête optimale. Confortable et précis.

La tête à 2 articulations existe en version pneumatique, motorisée et mécanique.



Pratique grâce à un système d'hygiène intelligent.

Prêt à l'emploi. En toute sécurité.

Ne laissez pas l'hygiène vous prendre du temps dans votre pratique quotidienne. Soyez soulagé, les fonctions d'hygiène intégrées et les processus entièrement automatisés de votre KaVo ESTETICA E70/E80 Vision s'occupent de tout, avec une efficacité absolument exemplaire. L'écran tactile vous guide pour l'utilisation des fonctions d'hygiène. Et vous bénéficiez d'un gain de temps significatif.

Automatisé et intégré.

Choisissez l'innovation! Mise sur le nettoyage et la désinfection automatiques, simples et fiables, des tuyaux d'aspiration et des tuyaux pour instruments. La station d'hygiène est maintenant intégrée au corps de l'unité du KaVo ESTETICA E70/E80 Vision. Vous pouvez y raccorder aussi bien des tuyaux de nettoyage que des tuyaux pour instruments. Sans effort. La station d'hygiène est amovible et thermodésinfectable.

Agréable. Parties amovibles.

KaVo n'a pas oublié non plus les éléments à contact manuel direct. Enlevez tout simplement les parties contaminées de l'appareil comme les poignées, les supports d'instruments ou le crachoir. Elles peuvent être nettoyées, désinfectées ou stérilisées, selon les besoins.



Les poignées, les tapis en silicone, le crachoir, les supports d'instruments et les étriers pivotants peuvent être facilement retirés et désinfectés.

Protection améliorée grâce au clapet anti-retour.

De petites idées pour de grands effets. Le clapet anti-retour sur les instruments et moteurs KaVo protège le système d'alimentation en eau. En contrepartie, le patient est protégé et l'eau de spray contaminée ne peut être aspirée dans l'unité de soins.

Programmes automatiques de rinçage.

Épargnez-vous le rinçage quotidien de toutes les conduites d'eau avec les fonctions automatiques de rinçage. Quatre programmes vous garantissent une hygiène fiable en appuyant sur un bouton.

Le système automatisé de décontamination permanente avec OXYGENAL 6 empêche la prolifération des micro-organismes lors du fonctionnement normal de votre unité de soins. La décontamination intensive (programme de nettoyage « hebdomadaire ») assure une qualité irréprochable des liquides de refroidissement et de pulvérisation, même après une longue période de stockage.

HYDRoclean nettoie et désinfecte tout le système d'aspiration et d'écoulement ainsi que les tuyaux d'aspiration. De plus, le gel DEKASEPTOL est dosé automatiquement pour épargner à votre assistante des actions manuelles.



DEKAmat et OXYmat – intégrés dans l'unité, apportent l'hygiène standardisée et automatisée dans votre cabinet, ce qui signifie moins de tâches manuelles pour votre assistante. En outre, l'entretien automatisé est le garant d'un atout de sécurité de fonctionnement.



Une efficacité à long terme avec un équipement adéquate.

Prenez une longueur d'avance.

La large gamme d'équipements des KaVo ESTETICA E70/E80 Vision vous permet d'être préparé de manière optimale à tout ce qui existe déjà, mais aussi à tout ce qui va arriver sur le marché.

Quand vos attentes deviennent réalité.

Pour vos instruments aussi, favorisez l'excellence! La nouvelle gamme MASTERmatic de KaVo couvre tous les domaines d'application et vous aide à fournir un travail de qualité et de précision. Bénéficiez d'une meilleure vue et d'un accès optimal grâce au contre-angle M25L et sa mini-tête.

Jetez un coup d'oeil vers l'avenir.

Avec les interfaces USB intégrées au KaVo ESTETICA E70/E80 Vision, votre fauteuil peut recevoir à tout moment des extensions et des nouveaux composants. Ainsi, vous bénéficiez de plus de liberté pour acquérir des appareils supplémentaires à l'avenir.

Mettez votre pratique en lumière.

Misez sur l'éclairage 5 étoiles KaVoLUX 540 LED, une lumière blanche naturelle d'une qualité hors du commun. Cet éclairage peut être allumé, éteint et commandé sans contact, même en mode COMPOsave. De plus sa composition faite de boîtiers fermés, surfaces lisses et poignées amovibles, permet une désinfection rapide et approfondie.

L'équilibre parfait entre puissance et confort.

Traitez vos patients rapidement et efficacement avec PiezoLED.

Le détartreur ultrasonique PiezoLED ne garantit pas uniquement la haute précision du nettoyage dentaire professionnel, mais vous permet également de gagner un temps précieux. Les sonotrodes en titane intégrées fournissent des vibrations linéaires contrôlées permettant un traitement efficace et rapide de vos patients. Le travail de précision laisse les dents et la gencive intactes, même dans les espaces les plus réduits.

Les émissions de lumière circulaires vous offrent une vue optimale et, en association avec le design léger et ergonomique, vous traitez toujours vos patients dans des conditions optimales.


KaVo INTRA LUX KL 703 LED – Un poids plumes pour un meilleur équilibre.

Venez découvrir la performance à l'état pur: une puissance infinie, un travail sans fatigue, une large plage de régimes de 100 à 40 000 min⁻¹ en transmission simple. Ce moteur est léger et sa structure compacte, ce qui le rend très agréable en main. Grâce à ce micromoteur et au SMARTdrive, votre travail est optimisé, ultra-précis et efficace dans toutes les situations de soins.

Laissez-vous convaincre par son fonctionnement extraordinairement silencieux rendant le travail beaucoup plus confortable, précis et simple.

Pleine puissance : SMARTdrive.

Plein gaz! Misez sur un travail précis, efficace et rapide, grâce à la commande motorisée SMARTdrive. Elle déploie sa pleine puissance de couple dès les gammes de vitesse basses de l'ordre de 100 min⁻¹. Il n'est pas nécessaire de changer de contre-angle pour éliminer les caries ou pour polir, vous pouvez procéder aux soins avec une seule manipulation, économisant ainsi du temps.

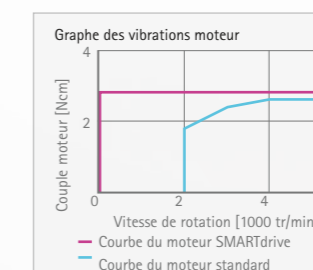

Profitez de la grande puissance de couple et du démarrage sans vibration de votre KaVo SMARTdrive ainsi que sa plage de vitesse élargie de 100 à 40 000 tr/min.

PiezoLED : la technologie à ultrasons répondants aux exigences les plus poussées en matière de traitement des patients.



Options d'équipement.

	E80 Vision			E70 Vision				E80 Vision			E70 Vision		
	T	C		T	S	C		T	C		T	S	C
Fauteuil dentaire							Élément assistante						
Coussin moelleux	●	●		●	●	●	Écran tactile en verre	●	●		●	●	●
Coussinage horizontal motorisé	●	●		-	-	-	Aspiration du brouillard de spray	●	●		●	●	●
Rehaussement motorisé de l'assise	●	●		-	-	-	Pompe à salive	●	●		●	●	●
Dossier							2ème pompe à salive	○	○		○	○	○
Comfort	x	x		x	x	x	Pièce à main 3 fonctions	○	○		○	○	○
Progress	x	x		x	x	x	Lampe à polymériser Satelec Mini LED	○	○		○	○	○
Tête							Support de tablette	○	○		○	○	○
à double articulation, mécanique	-	-		●	●	●	Bras à hauteur réglable	●	●		●	●	●
à double articulation, pneumatique	●	●		○	○	○	Support d'instruments amovible	●	●		●	●	●
SOMATIC E, motorisée	○	○		○	○	○	Corps de l'unité						
Coussin repose-tête confort	○	○		○	○	○	Crachoir en verre	x	x		x	x	x
Accoudoir							Crachoir en porcelaine	x	x		x	x	x
Gauche	○	○		○	○	○	Crachoir à rotation motorisée	●	●		○	○	○
Gauche et droite	○	○		○	○	○	Station d'hygiène	●	●		●	●	●
Élément praticien							Décontamination permanente	●	●		●	●	●
Écran tactile	●	●		●	●	●	Décontamination intensive	●	●		●	●	●
1. Tuyau de turbine	●	●		●	●	●	Hydroclean (système de rinçage)	●	●		●	●	●
2 - 5 tuyau de turbine	○	○		○	○	○	DEKAmat et OXYmat	●	●		●	●	●
1. moteur KL 703	●	●		●	●	●	Chaque-eau	●	●		●	●	●
2 - 5 moteur KL 703	○	○		○	○	○	VACUstopp	●	●		●	●	●
Fonction Endodontie	○	○		○	○	○	Pédale sans fil	○	○		○	○	○
COMFORTbase	○	○		○	○	○	Système d'alimentation						
Pièce à main 3 fonctions	-	-		●	●	●	Bloc-eau DVGW	●	●		●	●	●
Pièce à main multifonctions	●	●		○	○	○	Raccordement appareils périphériques	○	○		○	○	○
Détartreur ultrasonique PiezoLED	○	○		○	○	○	AQUAmat	●	●		●	●	●
Sérum physiologique	○	○		○	○	○	CENTRAmat	○	○		○	○	○
Moteur chirurgical S600 LED	○	○		-	○	-	Système d'évacuation						
Réchauffeur de spray pour instruments	●	●		●	●	●	Aspiration externe	●	●		●	●	●
Antireflux pour instruments	●	●		●	●	●	Récupérateur d'amalgames DÜRR	○	○		○	○	○
Support d'instruments amovible	●	●		●	●	●	Séparateur automatique DÜRR	○	○		○	○	○
Petit négatoscope	○	○		○	○	○	Lampe scialytique						
Grand négatoscope	○	○		○	○	○	KaVoLUX 540 LED	○	○		○	○	○
Interface USB	●	●		○	○	○	Colonne pour lampe scialytique	○	○		○	○	○
Freins pneumatiques pour bras fauteuil	●	●		○	○	○	Communication avec les patients						
Support pour deux plateaux standards	●	●		●	●	●	KaVo Screen One	○	○		○	○	○
Tablette de service réglable pour deux plateaux standard	●	-		●	-	-	KaVo Screen HD	○	○		○	○	○
Table de service 1658	-	●		-	-	●	CONEXIO	○	○		○	○	○
							Caméra intra-buccale KaVo ERGOcam One	○	○		○	○	○
							KaVo DIAGNOcam U	○	○		○	○	○

● Équipement de série ○ Équipement en option x Au choix - Non disponible

